


SHIGEMI 核磁管

SHIGEMI NMR TUBES

Shigemi 管的装样量是 0.2ml 左右，而且管壁比较薄，测试时，样品离探头线圈比较近，信噪比较高，据计算，Shigemi 管比普通核磁管的信噪比能提高 16%。

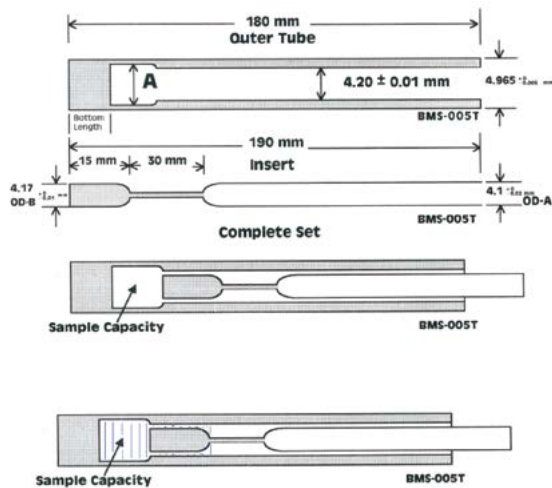

蓝线部分为样品溶液，液面不要超过细颈处

| 型号 | 名称 | 包装 |
|-----------------|--------------------------|-------|
| CMS-005TB/TJ/TV | Shigemi 核磁管-氘代氯仿, 5mm | 1 支/盒 |
| MMS-005TB/TJ/TV | Shigemi 核磁管-氘代甲醇, 5mm | 1 支/盒 |
| DMS-005TB/TJ/TV | Shigemi 核磁管-氘代 DMSO, 5mm | 1 支/盒 |
| BMS-005TB/TJ/TV | Shigemi 核磁管-氘代重水 5mm | 1 支/盒 |